

käyttöopas

KIDSFLEX **PRO**



Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ	4
1.1	Esipuhe	4
1.2	Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet	5
1.3	Huomautukset	5
1.4	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
1.5	Takuuehdot	5
1.6	Huolto ja korjaukset	6
1.7	Käyttökoulutus	6
1.8	Asennus autoon	6
1.9	Kiinnittäminen auton 3-pistevyöllä	7
1.10	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	6
1.11	Hyväksyntä/yhteensopivuus standardien mukaisten lasten turvaistuinten kanssa käytettäessä	10
1.12	Vasta-aiheet	10
2	TURVALLISUUS	11
3	PERUSMALLIN KÄSITTELY	12
3.1	Pääntuen säätäminen	12
3.2	Istuimen syvyyden säätäminen	12
3.3	Selkänojan kulman säätäminen	12
3.4	Olkatukien säätäminen	13
3.5	Rungon tukien säätäminen	13
3.6	Säädettävän selkänojan käsittely	14
4	LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ	15

Sisällysluettelo

4.1	Asennus autoon – ISOFIX-kiinnityksellä	15
4.2	Turvakaukalo	17
4.3	Abduktiokappale	18
4.4	istuinkulman säätö	18
4.5	kääntyvä sovitin	16
4.6	Jalkojen ohjainten säätäminen	20
4.7	Jalkatuki / jalkarulla	20
4.8	Suojamatto	21
4.6	Rintahihnojen hihnan kiinnittäminen	21
5	TAKU	22
6	MERKINTÄ	23
7	HUOLTO ja HOITO	24
7.1	Kannen irrottaminen	24
8	TEKNISET TIEDOT	25

1 Yleistä

1 Yleistä

1.1 Esipuhe

Olet valinnut KIDSLFEX-PRO-turvaistuimen ja saanut yritykseltämme korkealaatuisen tuotteen. Haluamme kiittää sinua luottamuksestasi.

Jotta voisitte nauttia tästä tuotteesta pitkään ja se helpottaisi arkeanne, olemme laatineet nämä ohjeet. Niissä kerrotaan, miten tuotetta käytetään oikein ja helposti sekä miten sitä hoidetaan ja huolletaan. Välttääksenne käyttövirheistä johtuvia vaurioita ja varmistaaksenne tuotteen optimaalisen käytön, lukekaa seuraavat ohjeet huolellisesti. Jos teillä on kysymyksiä tai ongelmia, ottakaa yhteyttä jälleenmyyjäanne.

Toivotamme teille ongelmatonta käyttöä ja toivomme, että tuotteemme täyttää odotuksenne.

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöoppaassa kuvattuun versioon.

Ennen laitteen asentamista ajoneuvoon ja ensimmäistä käyttökertaa lue ja noudata asennusohjeita sivuilla 4–6. Varmista, että käyttöohje säilytetään tuotteen mukana, jotta se on kaikkien istuinta käyttävien saatavilla.

Ystävällisin terveisin, HERNIK GmbH

1 Yleistä

1.2 Käyttötarkoitus ja käyttöaihe

KIDSFLEX-PRO on kehitetty erityistarpeisten lasten (GMFCS 3–5; esim. voimakas lihasjännityksen lasku, johon liittyy pään ja vartalon hallinnan puute) kuljettamiseen ajoneuvoissa.

Lapsia, joilla on heikko pään ja vartalon hallinta (esim. lapsuuden aivohalvaus, lihasdystrofia, hypotonia), voidaan tukea istuma-asennossa yksilöllisesti säädettävien rintatyynyjen ja erityisten tyyntyjen avulla, mikä takaa turvallisen kuljetuksen.

Tärkeiden lisävarusteiden avulla voidaan huomioida erityistarpeita, kuten istuinkulma tai vakaa abduktiokiila tai jalkatuki. Lisätietoja on luvussa 4.

1.3 Huomautuksia

KIDSFLEX-PRO-kuntoutuslastenistuin on suunniteltu käytettäväksi auton takapenkillä, ja se edellyttää toimivaa 3-pistevyötä. Istuin voidaan asentaa joko etumatkustajan istuimen tai kuljettajan istuimen taakse.

Auton 3-pistevyön lisäksi lastenistuin on varustettu 5-pisteisellä rinta- ja olkapäävyöllä, joka tarjoaa lapsellesi lisätukea.

1.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HERNIK GmbH vakuuttaa omalla vastuullaan, että IPAI-lasten turvaistuin täyttää olennaiset vaatimukset (direktiivin 93/42/ETY liite 1). Tuotteessa on edellä mainitun direktiivin mukainen CE-merkintä.

1.5 Takuuehdot

Takuu on voimassa vain, jos tuotetta käytetään määritellyissä olosuhteissa ja sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat valmistajan hyväksymättömistä komponenteista ja varaosista.

1 Yleistä

1.6 Huolto ja korjaukset

KIDSFLEX-PRO-tuotteen huolto ja korjaukset saa suorittaa ainoastaan valtuutetut jälleenmyyjät. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Korjauksissa käytetään ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

1.7 Käyttökoulutus

Turvaistuin toimitetaan täysin koottuna. Toimituksen yhteydessä erikoisliike opastaa käyttäjää laitteen käytössä käyttöohjeen avulla. Erikoisliikkeen tulisi asentaa turvaistuin autoon yhdessä käyttäjän kanssa ja, mikäli mahdollista, säätää Isofix-kiinnike tai kiinnityspidike.

Turvaistuinta asennettaessa on parasta pitää sitä yhdellä kädellä edestä keskeltä ja toisella kädellä yläreunasta. Optimaalisen istuma-asennon saavuttamiseksi turvaistuin on säädettävä yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Tämän tulisi aina tehdä erikoisliike.


Huomaa, että ISOFIX-sovitinta ei vaadita, sillä se ei vaikuta turvallisuuteen.

1.8 Asennus autoon

Aseta lastenistuin auton istuimelle. Varmista, että selkänoja on tasaisesti auton istuimen selkänojaa vasten.

Jos istuin on kallistettu, tämä ei ole mahdollista. Varmista tällöin, että istuin on mahdollisimman lähellä selkänojaa.

Vinkki! Jos auton istuimen päätuki on tiellä, poista se.

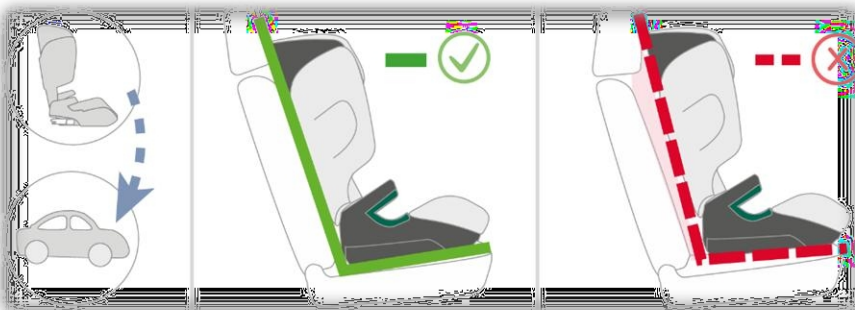

1 Yleistä

1.9 Kiinnittäminen auton 3-pistevyöllä

Jotta KIDSFLEX-PRO voi vaimentaa onnettomuudessa syntyviä valtavia voimia, se on kiinnitettävä ajoneuvon kolmipistevyöllä.

Pelkkä ISOFIX-kiinnitys ei riitä.

1. Aseta lapsi turvaistuimeen.
2. Vedä auton turvavyö ulos ja ohjaa se (lapsen edestä) solkeen.

VAROITUS! Varmista, että auton turvavyö ei ole kiertynyt, sillä se estää turvajärjestelmää tarjoamasta täyttä suojaa.

3. Lukitse vyön soljen kieleke ajoneuvon solkeen, kunnes kuulet napsahduksen.
4. Aseta olkavyö ja lantiovyö ajoneuvon lukon puolella olevaan tummanvihreään vyöohjaimeen ajoneuvon istuimessa.
5. Aseta myös lantiovyö istuintyynyn toisella puolella olevaan tummanvihreään vyöohjaimeen.

VAROITUS! Lantiohihnan on kuljettava mahdollisimman matalalla lapsen lantion yli molemmilta puolilta.

6. Työnnä diagonaalivyö pääntuen alla olevaan tummanvihreään vyönpidikkeeseen, kunnes se on kokonaan ja kiertymättömänä vyönpidikkeessä.
7. Varmista, että vinohihna kulkee lapsen solisluun yli eikä kosketa hänen kaulaansa.

Tarkista ennen jokaista matkaa, että...

- lastenistuin on kiinnitetty kunnolla,
- lantiovyö kulkee ajoneuvon istuimen molemmilla puolilla olevien tummanvihreiden vyöohjaimien läpi,
- soljen puolella oleva vinovyö kulkee myös turvaistuimen tummanvihreän vyöohjaimen läpi,
- diagonaalivyö kulkee pääntuen tummanvihreän vyöohjaimen läpi,
- diagonaalinen hihna kulkee vinosti taaksepäin,

1 Yleistä

- hihnat ovat kireällä eivätkä kiertyneet.



1.10 Vaatimustenmukaisuusvakuutus



VASTAAVUUSVAKUUTUS

Valmistaja: **HERNIK GmbH**
Osoite: **Gewerbering 8 83543
Rott am Inn Saksa**



SNR: **DE-MF-000011257**

Tuote: **vammaisille lapsille tarkoitettu turvaistuin**

Tyyppi: **Kidsflex Pro 1 / 2**

UDI-PI	Tuotenimi	Tuotenumero
4260675480620	KIDSFLEX-PRO 1, harmaa-musta	360000-D1
4260675480637	KIDSFLEX-PRO 1, punamusta	360000-D2
4260675480644	KIDSFLEX-PRO 2, harmaa-musta	370000-D1
426067548065 1	KIDSFLEX-PRO 2, punamusta	370000-D2

Lääkinnällisten laitteiden luokitus: **Kyseessä on luokan I lääkinällinen laite liitteessä VIII olevien luokittelusääntöjen mukaisesti**

Luokitus: **tämä on luokan I lääkinällinen laite liitteessä VIII olevien luokittelusääntöjen mukaisesti liitteessä VIII**

• Minä, allekirjoittanut, vakuutan omalla vastuullani, että yllä mainittu tuote täyttää seuraavien ohjeiden ja standardien olennaiset vaatimukset (MDR (EU) 2017/745:n liite 1). Vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritettiin MDR (EU) 2017/745:n liitteen IV mukaisesti. Tuotteessa on edellä mainitun ohjeen mukainen CE-merkintä.

- MDR (EU) 2017/745:n liite 1
- ECE-R 129-04

Rott am Inn, 1.12.2025

Andrés Moncayo

* * * * *

paikka, päivämäärä

Nimi

allekirjoitus

1 Yleistä

1.11 Hyväksyntä/yhteensopivuus tavallisten lasten turvaistuinten kanssa

KIDSFLEX-PRO on ECE R129/04 -standardin mukaisesti hyväksytty lasten turvaistuin, joka sisältää kaikki tarvikkeet. KIDSFLEX-PRO:n yksittäisiä osia ja tarvikkeita ei ole hyväksytty käytettäväksi yhdessä muiden markkinoilla olevien lasten turvaistuinten kanssa. Mahdolliset muutokset voivat mitätöidä sekä KIDSFLEX-PRO:n että kyseisen markkinoilla olevan lasten turvaistuimen hyväksynnän.

1.12 Vasta-aiheet

Vasta-aiheita ei ole tiedossa.

2 Turvallisuus

2 Turvallisuus

- Ennen käyttöä osat on tarkastettava sen varmistamiseksi, että ne ovat moitteettomassa toimintakunnossa ja kunnossa.
- Lapsen turvallisuus voidaan taata vain, jos istuin on asennettu oikein ja lapsi on kiinnitetty turvallisesti.
- Hihnat on kiristettävä ilman, että ne kiertyvät.
- 3-pisteinen turvavyö on pujotettava sille tarkoitettujen vyöohjaimien läpi, ja sen tulee istua tiukasti istuimen ympärillä.
- Tarkista seuraavat seikat:
 - A) että turvavyö on kunnolla paikallaan vyöohjaimessa
 - B) että vyön soljet on kiinnitetty oikein
 - C) ettei kankaita ole jäänyt kiinni
- Varmista, ettei lapsen ja turvavyön välissä ole kiinteitä esineitä, kuten neuloja, vyön soljia jne. Ne voivat aiheuttaa vammoja onnettomuuden sattuessa.
- Selitä lapsellesi, kuinka tärkeää on olla kunnolla kiinnitettynä ja että vyön asentoa ei saa muuttaa. Lapsen ei tule vetää vöistä tai avata soljia.
- Älä tee mitään muutoksia turvaistuimeen, sillä se voi vaarantaa lapsen turvallisuuden.
- Auton liikkuvat osat tai ovet eivät saa vahingoittaa turvaistuinta.
- Älä koskaan jätä lasta yksin turvaistuimeen.
- Kerro matkustajillesi, miten lapsi nostetaan istuimesta onnettomuuden jälkeen.
- Onnettomuuden jälkeen koko turvaistuin on vaihdettava uuteen.

3 Perusmallin käsittely

3 Perusmallin käsittely

3.1 Pääntuen säätäminen

Avaa pääntuen suojuksen vetoketju. Löysää takalevyn ruuvit.

Nyt voit säätää pääntuen haluttuun leveyteen. Kiristä ruuvit uudelleen.

Korkeuden säätämisestä on ohjeet kohdassa 3.6 ”Säädettävän selkänojan käsittely”.



3.2 Istuinsyvyyden säätäminen

Löysää ensin istuinalustan etuosan alaosassa oleva tarranauha. Löysää sitten molemmat ruuvit oikealla ja vasemmalla. Voit nyt säätää istuinalustan haluttuun syvyyteen.

Kiristä ruuvit sitten uudelleen.



3.3 Selkänojan kulman säätäminen

Selkänojan kulmaa voidaan säätää portaattomasti ja lukita mihin tahansa asentoon. Tämä varmistaa, että turvaistuin on vakaa kaikissa asennoissa. Avaa kaksi pikakiinnitintä ja siirrä selkänoja haluttuun asentoon. Sulje sitten pikakiinnittimet kulman lukitsemiseksi.



3 Perusmallin käsittely

3.4 Olkatukien säätäminen

Löysää istuimen takalevyssä olevien olkatukien ruuvit. Voit nyt säätää olkatukien leveyden haluttuun asentoon. Kiristä sitten ruuvit uudelleen.

Korkeuden säätämisestä on ohjeet kohdassa 3.6 "Säädettävän selkänojan käyttö".



3.5 Rungon tukien säätäminen

Löysää istuimen takalevyssä olevien vartalotukien ruuvit. Voit nyt säätää tuet haluttuun leveyteen. Kiristä ruuvit sitten uudelleen.

Korkeuden säätämisestä on ohjeet kohdassa 3.6 "Säädettävän selkänojan käsittely".



3 Perusmallin käyttö

3.6 Säädetävän selkänojan käyttö

Uudelleen suunniteltu selkänoja on teleskooppisesti säädettävissä, jolloin pääntuen, olkahihnojen, olkapääohjainten ja rintapehmusteiden asento muuttuu samanaikaisesti.

Löysää ensin istuimen molemmilla puolilla oleva tarranauhapehmuste (1). Löysää sitten selkänojan oikealla ja vasemmalla puolella olevat kaksi ruuvia (2). Voit nyt säätää selkänojan haluttuun korkeuteen. Kiinnitä sitten ruuvit ja pehmuste uudelleen tarranauhalla.

Tarvittaessa voit käyttää istuimen takapuolella olevia selkätyynyn osia selkätyynyn pidentämiseen.




4 Lisävarusteiden käyttö

4 Lisävarusteiden käyttö

4.1 Asennus autoon – ISOFIX-kiinnityksellä

Pyydä asentajaa näyttämään, miten istuin asennetaan, kun vastaanotat ja säädät turvaistuinta.

KIDSFLEX-PRO kiinnitetään turvallisesti ajoneuvoon ISOFIX-kiinnitysvarsien avulla. Lapsi kiinnitetään sitten ajoneuvon 3-pistevyöllä.

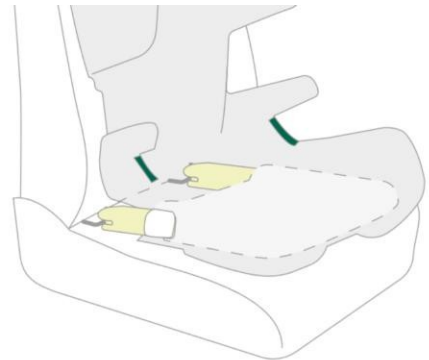

VINKKI! ISOFIX-kiinnityskohdat sijaitsevat istuimen ja auton istuimen selkänojan välissä.




1. Siirrä auton istuimen pääntuki korkeimpaan asentoonsa.
2. Pidä ISOFIX-säätövipua painettuna (katso kuva) ja työnnä ISOFIX-lukitusvarret kokonaan ulos punaisen narun avulla.
3. Paina samanaikaisesti lukituspainiketta ja punaista vapautuspainiketta istuimen molemmilla puolilla. Näin varmistat, että molemmat ISOFIX-lukitusvarsien koukut ovat auki ja käyttövalmiina.



4 Lisävarusteiden käyttö

4. Aseta lastenistuin ajosuuntaan hyväksytylle ajoneuvon istuimelle. Varmista, että selkänoja on tasaisesti ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.
5. Aseta kaksi ISOFIX-lukitusvartta suoraan kahden asennusavustimen eteen.
6. Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret kiinnitysohjaimiin, kunnes ne napsahtavat paikalleen molemmilta puolilta.

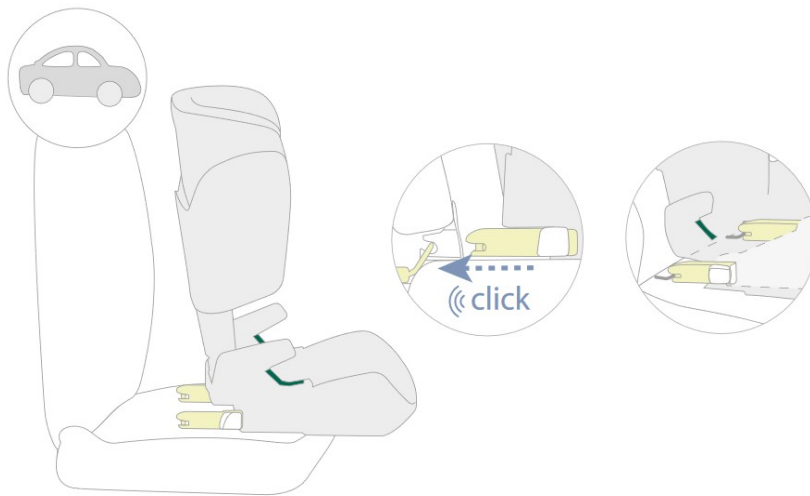

7. Pidä ISOFIX-säätöpainiketta painettuna ja liu'uta lastenistuin taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.
8. Käytä lastenistuinta hieman edestakaisin varmistaaksesi, että se on kiinnitetty kunnolla.

4 Lisävarusteiden käyttö


4.2 Turvatarjotin

Asennus:

1. Kun istuin toimitetaan, pyydä ohjeita sen asentamiseen ja säätämiseen.
2. Kiinnitä turvakaukalo kiinnikkeisiin sen jälkeen, kun olet asettanut lapsen istuimeen ja kiinnittänyt turvavyön.
3. Lapsen käsien tulisi levätä pöydällä, jolloin istuma-asento on pystyssä. Tämä tukee ylävartaloa.
4. Varo, ettei tyynyllä ole leluja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa. Älä käytä kovia, kiinteitä tai teräväreunaisia esineitä!

Kiinnityskannattimien korkeutta voidaan säätää. Löysää tätä varten kaksi ruuvia ja kiinnitä ne haluttuihin kiinnitysreikiin.


Huomautus: Jos turvatasoa ei tarvita, voit irrottaa oikealla ja vasemmalla olevat kaksi kiinnikettä.

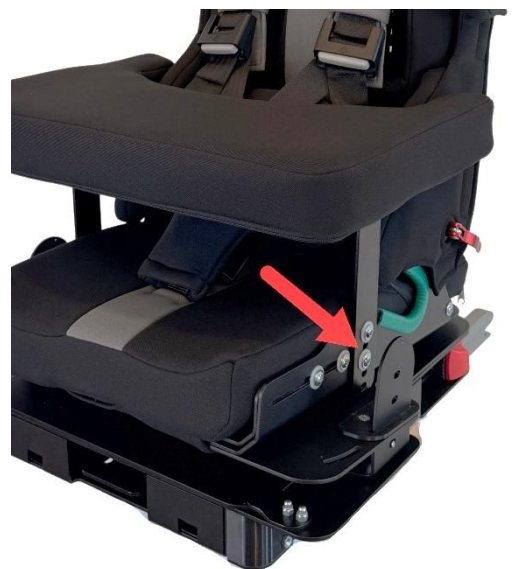

4 Lisävarusteiden käyttö

4.3 Abduktiokappale

1. Abduktiokappale auttaa lasta pitämään tietyn etäisyyden polvien välillä.
2. Kiilan tulee olla kiinni istuimen pehmusteessa kuvan osoittamalla tavalla. Kiilan syvyyttä voidaan säätää. Löysää tätä varten kaksi kuusioruuvia ja siirrä niitä istuimen alle.
3. Abduktiokappaletta tulee käyttää aina ajon aikana (jos se on valittu lisävarusteena), muuten kiinnitys voi aiheuttaa lapselle loukkaantumisen.
4. Vipua voidaan siirtää toiseen asentoon vetämällä sitä hieman eteenpäin ilman, että ruuviliitosta liikutetaan. Varmista, että vipu on yläasennossa eikä ole tiellä, sillä muuten lapsen pohkeet saattavat osua siihen.

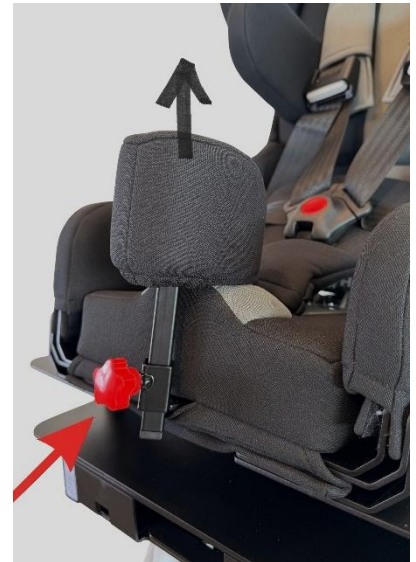

4.4 Istuimen kallistuksen säätö

Jos ajoneuvon istuimen kallistuskulma on liian pieni, turvaistuimen kallistuskulmaa voidaan lisätä istuimen kallistuksen säätötoiminnolla.

Tätä varten paina punaista palloa (katso kuva). Kun istuin on halutussa asennossa, punainen pallo voidaan lukita paikalleen kääntämällä sitä.



4 Lisävarusteiden käyttö

4.5 Kääntöadapteri

Jotta lapsen siirtäminen autoon olisi helpompaa päivittäin, suosittelemme kääntöadapteriamme, jonka avulla turvaistuinta voidaan kääntää 90° ulospäin. Teknisistä syistä kääntö on mahdollista vain yhteen suuntaan. Toiseen suuntaan on mahdollista vaihtaa myöhemmin muokkaamalla istuinta. ISOFIX-adapterin tai kiinnityskannattimen käyttöä suositellaan!

Käännä istuinta vetämällä kahvasta ylöspäin ja liikuttamalla istuinta samanaikaisesti. Lisävarusteena saatava jalkatuki pysähtyy estäen törmäykset etumatkustajan istuimeen ja B-pylvääseen.

Kiinnitä huomiota lapsen jalkoihin, kun käännät istuinta!

Kun olet siirtänyt lapsen, käännä KIDSFLEX-PRO yksinkertaisesti takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Kuuntele, kun kieleke lukittuu paikalleen ja kuuluu "napsahdus".



4 Lisävarusteiden käyttö

4.6 Jalkatukien säätäminen

Löysää ensin tarranauha istuinalustan etuosan alaosassa. Nosta sitten istuintyyny ylös. Sen alla on vasemmalla ja oikealla kaksi urareikää jalkatukia varten. Löysää vastaavat ruuvit. Voit nyt säätää jalkatukia haluttuun leveyteen.

Kiristä sitten ruuvit uudelleen ja kiinnitä istuintyyny takaisin paikalleen.



4.7 Jalkatuki / jalkarulla

Kiinnikkeet (1) kiinnitetään turvaistuimen istuinpinnan alle sylinteriruuvien avulla pohjakiinnikkeeseen, jolloin myös syvyyttä voidaan säätää.

Tukitankojen kulmaa voidaan säätää avaamalla pikavapautusvivut (2). Varmista, että vivut ovat sen jälkeen asennossa, jossa ne eivät aiheuta loukkaantumisvaaraa!

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avaa vasemmalla ja oikealla olevat ruuvit (3). Korkeutta voidaan nyt säätää portaattomasti, minkä jälkeen ruuvit voidaan kiristää uudelleen.



4 Lisävarusteiden käyttö

4.8 Suojamatto

Aseta suojamatto turvaistuimelle tukkimatta ISOFIX-kiinnityskohdissa olevia syvennyksiä (jos sellaisia on).

Aseta KIDSFLEX-PRO suojamaton keskelle ja kiinnitä se luvussa 4.1 kuvatulla tavalla. Virhe!



Lähdettä ei löytynyt. .



4.9 Rintavyön kiinnittäminen

4 Lisävarusteiden käyttö

Aseta vyö lapsen rinnan korkeudelle. Jätä riittävä etäisyys kaulasta! Vyön liukumisen estämiseksi sen sisäpuolella on tarranauha. Löysää sitä sormillasi.

Säädä nyt hihnan leveyttä vetämällä sitä liukukappaleesta (2) ulos ja avaamalla sitten solkea (1) vastaavasti.

Kiinnitä nyt hihnan vapaa pää uudelleen liukukappaleen (2) avulla, jotta hihna ei löysty tahattomasti.



5 Takuu

5 Takuu

HERNIK-tuotteet ovat huippuluokkaa ja valmistettu tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että sinulla on syytä valitukseen, HERNIK GmbH takaa toimituksen jälkeen yleisten ehtojensa mukaisesti seuraavaa:

- 24 kuukautta rungolle
- 12 kuukautta kaikille liikkuville osille

Räätälöityjä tuotteita ei voida takata, ellei kyseessä ole valmistus- tai materiaalivika. Tällöin viallisen tuotteen vaihto taataan 12 kuukauden ajan.

Takuuta ei voida myöntää osille, jotka ovat alttiina säännölliselle kulumiselle, liialliselle rasitukselle tai voimakkaalle vaurioitumiselle.

Tämän takuun mukaiset vaatimukset edellyttävät, että laitetta on käytetty asianmukaisesti käyttöohjeiden mukaisesti.

Takuuvaatimus raukeaa, jos laitteeseen on tehty muutoksia, jälkiasennuksia tai virheellisiä korjauksia ilman HERNK GmbH:n etukäteen antamaa suostumusta.

Muut vaatimukset, niiden oikeudellisesta perustasta riippumatta, erityisesti välittömien tai välillisten vahinkojen korvausvaatimukset, suljetaan pois.

6 Merkinnät

6 Merkinnät

Autoturvaistuimen takapuolelta löytyy seuraava merkintä:

§g/ HERNIK

Gewerbering 8
83543 Rott am Inn

KIDSFLEX^{RO}



4260675480644



Päivämäärä: 05.12.2025
SNR: KF1—PRO—2025—1000

Erityisvaatimukseen tarkoitettu
pidätyslaite "S" (DE)

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!

HERNI

Gewerbering 8,
83543 Rott am Inn

KIDSFLEX^{RO}

4260675480644



Päivämäärä: 55.12.2025
SNR: KF2-PRO-2025-1000

Erityisvaatimukseen tarkoitettu turvalaitteisto
"S" (DE)

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä!



7 Huolto ja hoito

7 Huolto ja hoito



7.1 Kannen irrottaminen

Kansi voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa (30 °C) hellävaraisella pesuohjelmalla miedolla pesuaineella. Noudata kannen pesumerkinnöissä olevia ohjeita.

Muoviosat voidaan puhdistaa saippuavedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

VAROITUS! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinsuojusta.

1. Irrota pääntuki (jos sellainen on) löysäämällä ruuvia.
2. Irrota nyt olkahihnat selkänojan sisäpuolella olevasta tarranauhasta.
3. Selkänojan pehmuste voidaan nyt poistaa.
4. Avaa vetoketju ja vedä päälliset pois.
5. Istuinpehmusteen osalta löysää ensin hihnan kiinnitys soljen ja istuinlevyn välillä.
6. Irrota istuinlevy, avaa vetoketju ja poista päälliset.

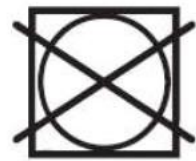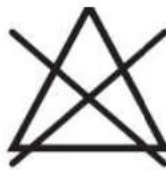

7.

8 Tekniset tiedot

8 Tekniset tiedot

	Gr. 1	Gr. 2
Scheitelhöhe	56 - 71 cm	58 - 73 cm
Rückenhöhe	33 - 48 cm	33 - 51 cm
Sitzbreite	28 cm	33 cm
Sitztiefe (einstellbar)	31 - 37 cm	36 - 42 cm
Höhe Thoraxpelotten	19 - 38 cm	24 - 43 cm
Höhe Oberkörperführungsp.	23 - 42 cm	28 - 47 cm
Abstand Thoraxpelotten/OKFP	14 - 25 cm	17 - 28 cm
Körpergröße	100 - 125 cm (max. 50 kg)	100 - 150 cm (max. 50 kg)
Gesamthöhe	71 - 86 cm	72 - 87 cm

*Jotkin tekniset tiedot voivat vaihdella lisävarusteiden mukaan.Vakiovarusteet:

- 5-pistevyö, jossa on iskunvaimennin ja olkapäätoppaukset
- Vakiopääntuki
- Säädetty istuinsyvyys
- Selkänojan kulman portaaton säätö
- Rintapehmusteet
- Olkapääohjaimet
- Säädetty selkänoja
- Vyön ohjain (asennetaan oikealle tai vasemmalle)

huomautukset



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83563 Rott am Inn • Saksa

W +39 8039-9093930 • +39 8039-90939319
info@hernik.de • www.hernik.de